


BedMover

TT0450-M-BM

BedMoverは、リモコン操作によって
病院のベッドを楽に移動させ、
スタッフの身体的負担を軽減しながら
患者の快適性を最大限に確保するのに
最適なソリューションです。

デモ動画
公開中

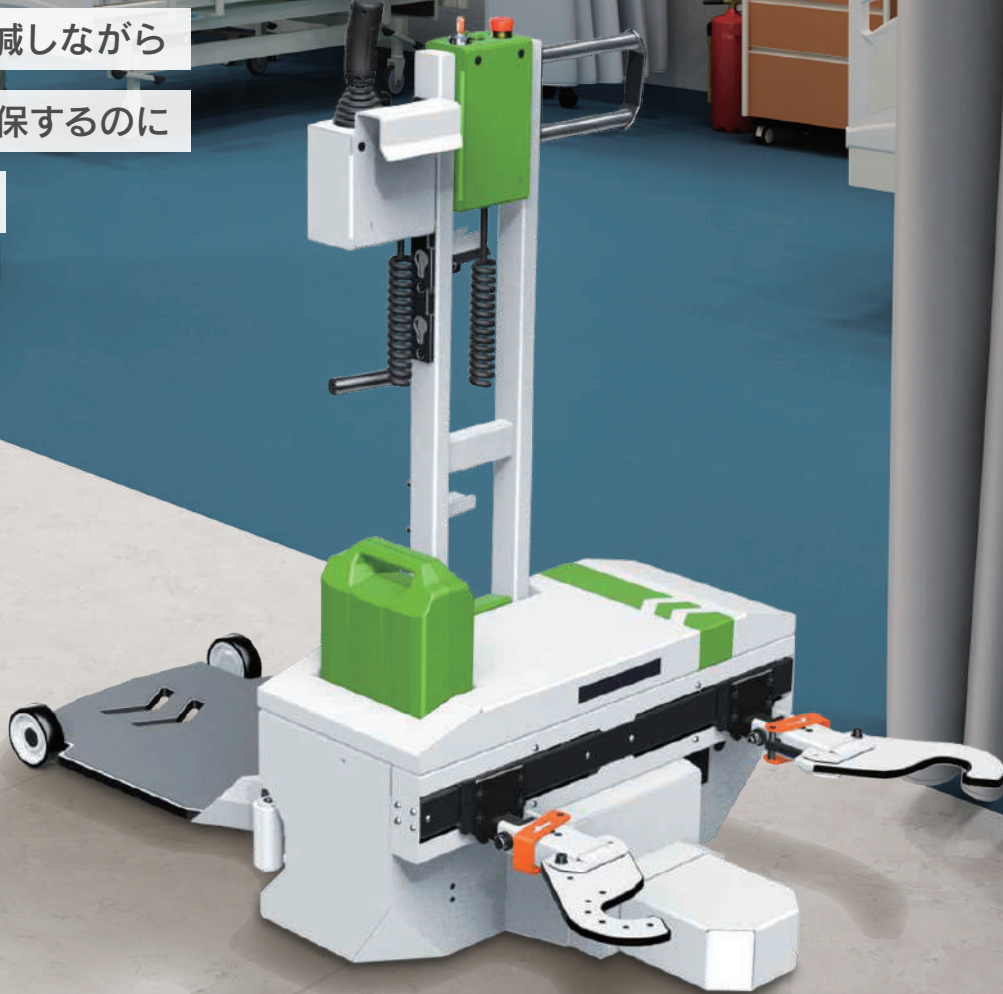

※写真と一部外観が異なる場合があります。

主な特長

- ≫ 交換可能なバッテリー (24/7 使用可能)
- ≫ メンテナンスが容易
- ≫ 低騒音モーター搭載

- ≫ 誰でも簡単に使用可能
- ≫ 人間工学に基づいたデザイン

>> BedMover TT0450-M-BM

ティラー

歩行中はティラーを傾ける事が可能です。これにより、操作性があがり、歩行が容易になります。

固定フック

交換可能な連結フックにより、ほぼ全ての病院用ベッドに簡単に接続できます。

コーナーガードクッション

プラスチックローラーにより、壁に接触した場合でも双方の損傷を防ぎます。

パワフルなブラシレスモーター

スムーズで静かな乗り心地を実現します。トラブル時には電磁ブレーキにより自動でブレーキが掛かります。

ジョイスティック

ベッドムーバーの制御と速度を簡単に調整できます。

ティラーユニット

フックを操作し、ベッドとベッドムーバーを接続します。

ドライブユニット

ベッドの頭部に設置でき、常に移動方向を見ながら移動可能です。

ファンクションキー

クラクション、緊急停止ボタンがドライブユニットに設置されており、常にオペレーターの手元で操作可能です。

バッテリー

交換可能なバッテリーでベッドムーバーを効率的に使用できます。

スケートボード※

オペレーターの移動用スケートボードです。病院内を歩くことなく快適に走行できます。

スケートボードアタッチメント

簡単な動作で、スケートボードをベッドに取り付けることができます。



使用イメージ



※スケートボードはオプションです。

>> 主な仕様

基本機能	車体寸法 (L×W×H)	600×740×1200mm	走行機能	走行速度：前進 (荷重あり/荷重なし)	4.5/5.8km/h
	爪の可動高 (low/high)	231/617mm		走行速度：後進 (荷重あり/荷重なし)	4.5/5.8km/h
	地上高	15mm		最大牽引力 (S2=60min)	136N
	ホイールベース	432mm		最大牽引力 (S2=5min)	273N
	重量 (バッテリー含む)	100kg		最大傾斜角度 (0.2min) (荷重あり/荷重なし)	3.0/5.0%
タイヤ	最大搬送重量	450kg	バッテリー	ブレーキ	電磁ブレーキ
	タイヤ種類 (フロント/リア)	ポリウレタン/ノンマーキングソリッドタイヤ		バッテリー種類	LiFePO4
	タイヤサイズ (フロント/リア)	75/150mm		バッテリー容量	24V/40Ah
	補助輪サイズ	75mm		バッテリー重量	8.5kg
	車輪数 (フロント/リア)	1/1 (駆動)		モータ出力 (S2=60min)	130kW
その他	トレッド (フロント/リア)	-/574mm	その他	駆動ユニット	直流
				騒音レベル	<65db(A)

※最大搬送重量は、傾斜の種類、移動時間、床面の種類により異なります。

※最大牽引力 (N) は、モータの出力によって決まりますが、車輪・牽引荷重・床面の種類、走行可能重量によって影響を受けます。

※この表のすべての値には、+/- 5% の許容誤差があります。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6662-6595

